



Halo Sense Smart

Capteur de pollution pour laboratoire

La vie au laboratoire devient + Simple + *Sûre*



Suivez la qualité de l'air que
vous respirez au laboratoire

Un suivi permanent

Halo Sense Smart surveille en permanence la qualité d'air de votre laboratoire et détecte les pollutions de l'air ambiant pour un large spectre de polluants et vapeurs.

La solution aux différentes pollutions


Halo Sense Smart est proposé en 3 versions : Composés Organiques Volatils (COV), Acides et Formaldéhyde.




Economies d'énergie

Halo Sense Smart peut s'interfacer avec les systèmes de gestion technique des bâtiments. En l'absence de pollution, il est possible de réduire la surconsommation d'air neuf et la consommation énergétique qui en découle.

La technologie SMART

La technologie SMART permet par la lumière de communiquer à l'utilisateur la présence d'une pollution. Il peut ainsi, au travers d'une pulsation lumineuse, être informé en temps réel sur la qualité d'air du laboratoire. L'utilisation de l'eguard app permet de recevoir en direct des alertes et des notifications de sécurité.

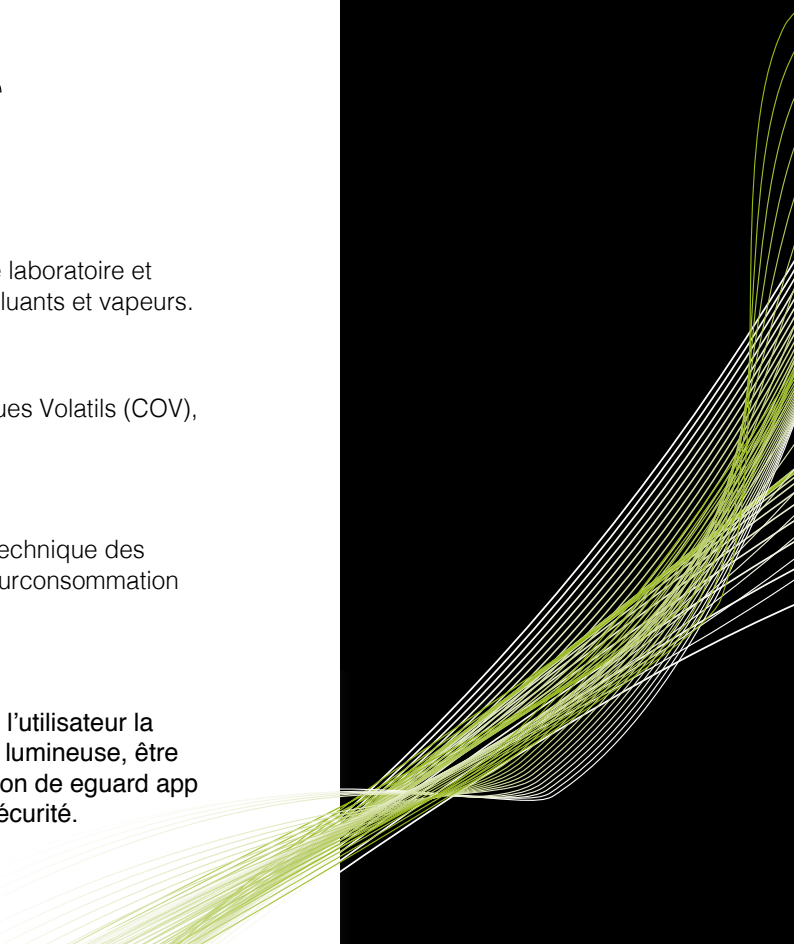

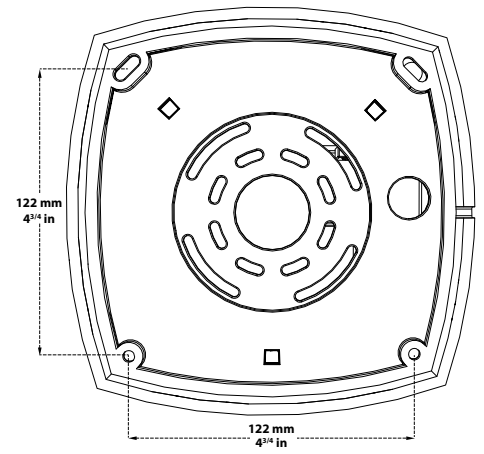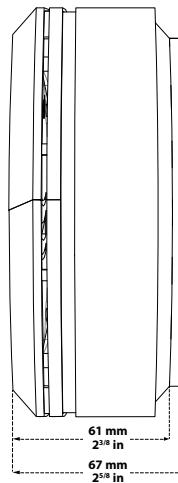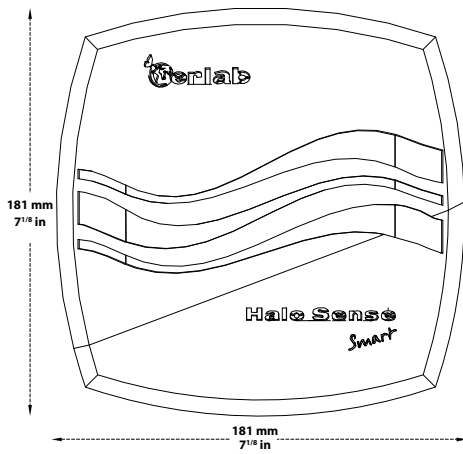

Halo Sense Smart 3 versions

COV

Pour la détection des composés organiques volatils

Formaldéhyde

Pour la détection des vapeurs de formaldéhyde

Acides

Pour la détection des vapeurs acides

Boîtier	ABS		
Détection	Capteur semi-conducteur	Cellule électrochimique	Cellule électrochimique
Poids	1kg		
Sensibilité	5 niveaux de réglage	3 niveaux de réglage	
Installation	Fixation via platine démontable : mur, pailleasse, plafond		
eGuard app	Application pour le contrôle et le suivi à distance		
Consommation d'énergie	10 W		
Interface	Communication simple par pulsation lumineuse / signal sonore (désactivables)		
Tension / fréquence	80-240V 50/60hz		
Connectivité	via port Ethernet (câble RJ45 fourni)		
Câble RJ45	Longueur: 3m		
Contact sec	1 permanent pour report d'alarme (3,3V)		
Couverture	de 14 à 40 m ²		



Téléchargez eGuard app et suivez à distance la qualité d'air de votre laboratoire

En cas de détection de pollution dans le laboratoire, eGuard envoie des alertes sur votre mobile et vous permet d'agir immédiatement.



Disponible pour Smartphone et PC



France
+33 (0) 2 32 09 55 80 | ventes@erlab.net

USA
+1 800-964-4434 | captairsales@erlab.com

Chine
+86 (0) 512 5781 4085 | sales.china@erlab.com.cn

Malaysia
+60 (0) 7 3 555 724 | erlab@tm.net.my

Allemagne
0800 330 47 31 | verkauf@erlab.net

Royaume-Uni
+44 (0) 1722 341 940 | salesuk@erlab.net

Italie
+39 (0) 2 89 00 771 | vendite@erlab.net

Espagne
+34 93 673 24 74 | ventas@erlab.net

