



Halo Sense Smart

Rilevatore di inquinamento per laboratorio

La vita in laboratorio diventa + Semplice + *Sicura*



Seguite la qualità dell'aria che
respirate in laboratorio

Un monitoraggio continuo

Halo Sense Smart controlla in modo continuo la qualità dell'aria del vostro laboratorio e rileva gli inquinanti dell'aria ambiente per un'ampio spettro di inquinanti e vapori.

La soluzione ai diversi inquinamenti


Halo Sense Smart è disponibile in 3 versioni: Composti Organici Volatili (COV), Acidi e Formaldeide.




Risparmio energetico

Halo Sense Smart può interfacciarsi con i sistemi di gestione edile. In assenza di inquinamento, è possibile ridurre l'apporto d'aria nuovo e quindi di risparmiare energia.

La tecnologia SMART

La tecnologia SMART permette, grazie alla luce, di comunicare all'utilizzatore il suo livello di protezione. Può così, tramite luce pulsante, essere informato in tempo reale sulla qualità dell'aria del laboratorio. L'utilizzo dell'eGuard app permette di ricevere in tempo reale gli allarmi e delle notifiche di sicurezza.

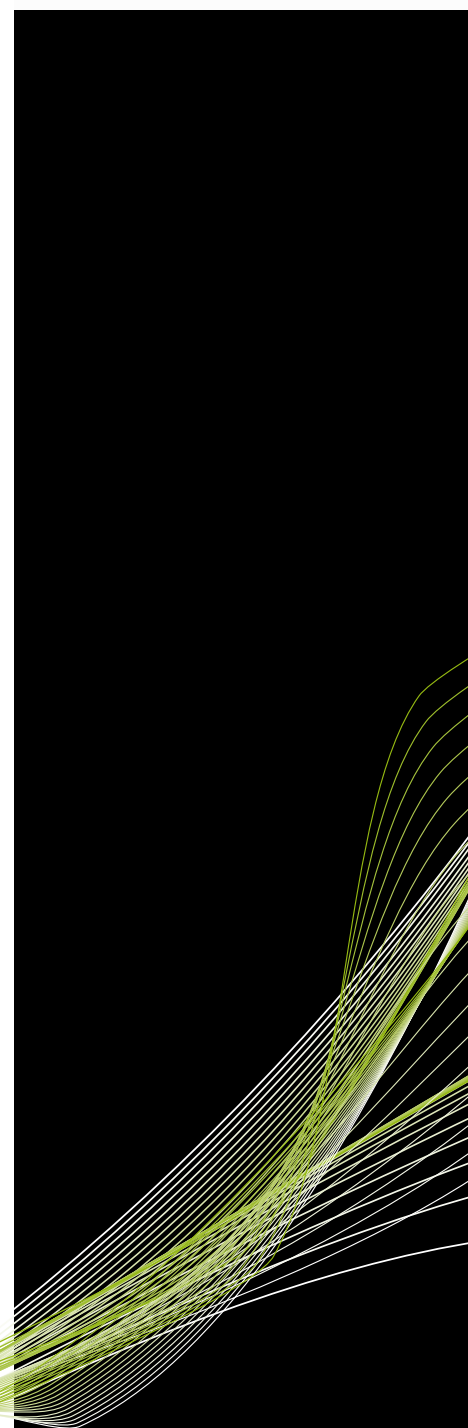

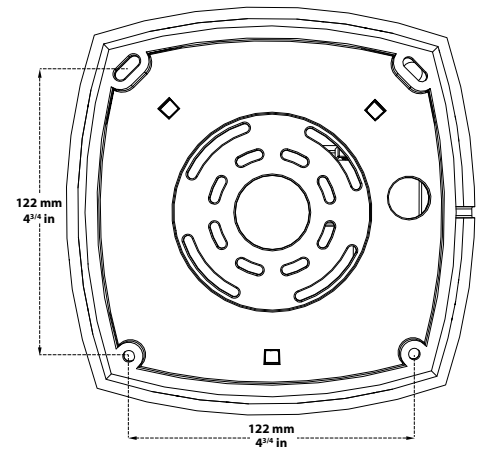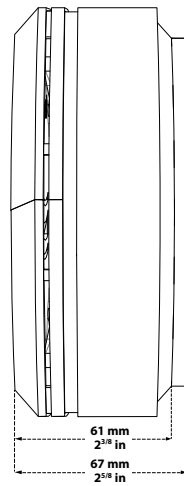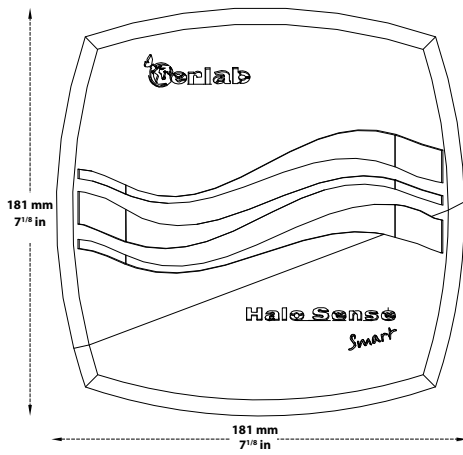

Halo Sense Smart 3 versioni

COV

Per il rilevamento dei
Composti Organici Volatili

Formaldeide

Per il rilevamento dei
vapori di Formaldeide

Acidi

Per il rilevamento dei
vapori Acidi

Cassone in	ABS (Acrilnitrile Butadiene Stirene)		
Rilevamento	Sensore semi-conduttore	Sensore elettrochimico	Sensore elettrochimico
Peso	1kg		
Sensibilità	5 livelli di sensibilità	3 livelli di sensibilità	
Installazione	Fissaggio con piastra smontabile : a muro, sopra bancone, a soffitto		
eGuard app	Applicazione per il controllo e il monitoraggio a distanza		
Consumo energetico	10 W		
Interfaccia	Comunicazione semplice da luce pulsante / allarme sonoro (allarmi disattivabili)		
Tensione/frequenza	80-240V 50/60hz		
Connettività	tramite cavo Ethernet (cavo RJ45 fornito)		
Cavo RJ45	Lunghezza: 3m		
Contatto pulito	1 permanente per trasmissione allarme (3,3V)		
Copertura	da 14 a 40 m ²		



Scaricate l'applicazione eGuard e seguite a distanza la qualità dell'aria del vostro laboratorio

In caso di rilevazione di inquinamento nel laboratorio, eGuard invia una notifica sul vostro cellulare e vi permette di agire immediatamente.



Disponibile su Smartphone e PC



Francia
+33 (0) 2 32 09 55 80 | ventes@erlab.net

Stati Uniti
+1 800-964-4434 | captairsales@erlab.com

Cina
+86 (0) 512 5781 4085 | sales.china@erlab.com.cn

Malaysia
+60 (0) 7 3 555 724 | erlab@tm.net.my

Germania
0800 330 47 31 | verkauf@erlab.net

Regno Unito
+44 (0) 1722 341 940 | salesuk@erlab.net

Italia
+39 (0) 2 89 00 771 | vendite@erlab.net

Spagna
+34 93 673 24 74 | ventas@erlab.net



www.erlab.com



2018 Celebrating 50 years
of innovation in filtration