



Captair Pyramid

Tragbare Handschuhboxen

Schützen Sie sich bei Ihrer Labortätigkeit



Anwendungen :

- Die Öffnung verdächtiger Pakete
- Probenentnahmen vor Ort
- Arbeiten in inerter Umgebung
- Die Entwicklung von Fingerabdrücken
- Schutz von Menschen gegen Spritzer bei Biopsien
- Ermöglicht das Arbeiten in staub- und feuchtigkeitsfreier Umgebung

Transportierbarer Isolationsarbeitsraum

Die Captair Pyramid Handschuhbox ist für den Anwenderschutz sowie bei der Untersuchung oder dem Transport von biologischen Komponenten geeignet.

Eine schnelle und einfache Installation

Universell einsetzbarer Arbeitsraum aus hochwertigem transparenten PVC. Innerhalb weniger Sekunden montiert, kann an jedem beliebigen Ort verwendet werden. Die geneigte Form des Rahmens sorgt für eine ergonomische Arbeitshaltung. Der leichte und transportable Arbeitsraum wird zahlreichen Anforderungen im Labor oder bei Vor-Ort-Einsätzen gerecht.


Optimale Abdichtung


Jeder Arbeitsraum wird einem Test unterzogen, bevor sie auf den Markt kommt. Die Einheit wird mit Druckluft einem Druck von 2,5 mmHg ausgesetzt. Jedes Produkt trägt eine Seriennummer und ist von einer Konformitätsbescheinigung begleitet.



Leicht transportierbar

Biegsame PVC-Verpackung für einen leichten Transport.

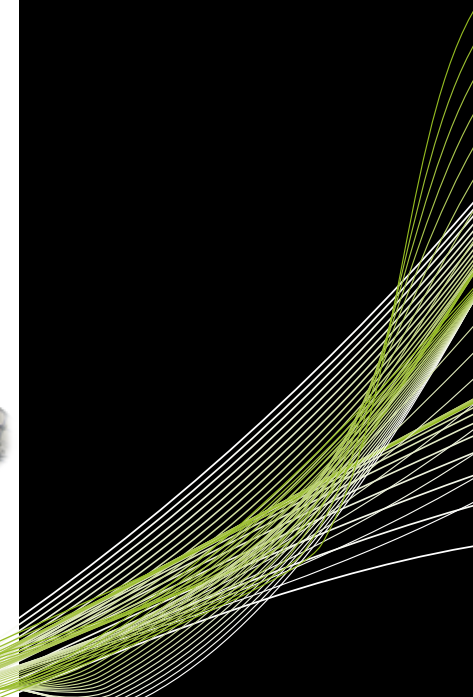

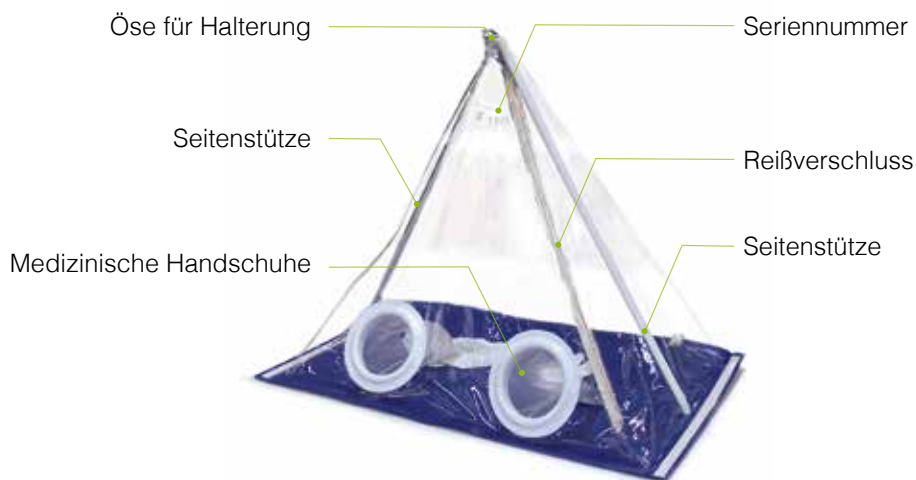

Abmessungen

Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)
860	560	725

Weitere technische Daten

Arbeitsraum und Basis	Biegsames PVC zusammengesetzt durch Hochfrequenzschweissung
Verschliessung	Doppelte Dichtungsrollen (600mm)
Öffnungen für die Arme	PVC starr 115 mm Ø
Öse für Halterung	16 mm Ø
Anwendungstemperatur	-25° zu +45°
Gewicht	1,55 kg

Ausstattungen

Medizinische Handschuhe	Aus Butyl (Stulpen aus PVC)
Seriennummer	Eindeutige Nummer für eine bessere Rückverfolgbarkeit
Ventil	Ventil zur Füllung des Arbeitsraumes mit einem Inertgas (Stickstoff)

Deutschland
0800 330 47 31 | verkauf@erlab.net

Aus anderen deutschsprachigen Ländern
+33 (0) 2 32 09 55 95 | verkauf@erlab.net

Spanien
+34 93 673 24 74 | ventas@erlab.net

Die USA
+1 800-964-4434 | captairsales@erlab.com

Frankreich
+33 (0) 2 32 09 55 80 | ventes@erlab.net

China
+86 (0) 512 5781 4085 | sales.china@erlab.com.cn

Grossbritannien
+44 (0) 1722 341 940 | salesuk@erlab.net

Malaysia
+60 (0) 7 3 555 724 | erlab@tm.net.my

Italien
+39 (0) 2 89 00 771 | vendite@erlab.net

