



# Captair Pyramid

Caja de guantes transportable

Intervengan, recojan, analicen estando al mismo tiempo protegido



## Aplicaciones :

- Apertura de paquetes sospechosos
- Tomas de muestras en el sitio
- Trabajos en atmósfera inerte
- Revelados de huellas dactilares
- Protección de las personas frente a las proyecciones durante la realización de biopsias
- Realización de manipulaciones protegiéndolas de polvo y de humedad

## Recinto de aislamiento portátil

Captair Pyramid está destinado a la protección de las personas, la investigación y el transporte de elementos biológicos.

## Una instalación y utilización fácil

Recinto multi-función en PVC transparente de alta calidad. Montado en pocos segundos, puede ser utilizado en cualquier parte. La forma inclinada de la estructura permite una posición de trabajo ergonómica. Transportable y ligero, este recinto de protección puede convenir a muchas exigencias en laboratorio o en el exterior.

## Estanqueidad óptima

Cada recinto es sometido a una prueba antes de su comercialización. Se realiza un inflado con aire comprimido a una presión de 2,5 mm Hg. Cada recinto, identificado por un número de serie, se suministra con un certificado de conformidad.




## Fácil transporte

Embalaje flexible en PVC, para un transporte fácil.



# Especificaciones

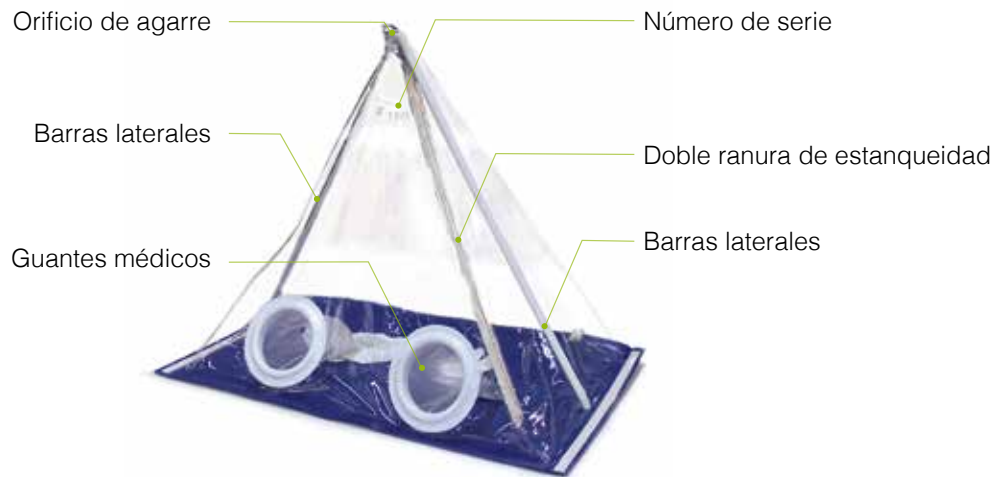

## Dimensiones

Largura (mm)	Profundidad (mm)	Altura (mm)
860	560	725

## Características

<b>Recinto y base</b>	PVC flexible unido por soldadura de alta frecuencia
<b>Cerradura</b>	Doble ranura de estanqueidad (600mm)
<b>2 Paso de los bazos</b>	PVC rígido 115 mm Ø
<b>Orificio de agarre</b>	16 mm Ø
<b>Temperatura de uso</b>	-25° a +45°
<b>Peso</b>	1,55 kg

## Equipamientos

<b>Guantes médicos</b>	En butilo y puños en PVC
<b>Número de serie</b>	Número único para mejor trazabilidad
<b>Válvula</b>	Permite el relleno del recinto con un gas inerte (Óxido de Nitrógeno)

Francia  
+33 (0) 2 32 09 55 80 | ventes@erlab.net

Alemania  
0800 330 47 31 | verkauf@erlab.net

Estados Unidos  
+1 800-964-4434 | captairsales@erlab.com

Reino Unido  
+44 (0) 1722 341 940 | salesuk@erlab.net

China  
+86 (0) 512 5781 4085 | sales.china@erlab.com.cn

Italia  
+39 (0) 2 89 00 771 | vendite@erlab.net

Malasia  
+60 (0) 7 3 555 724 | erlab@tm.net.my

España  
+34 93 673 24 74 | ventas@erlab.net



www.erlab.com



2018 Celebrating 50 years  
of innovation in filtration