



# Captair Pyramid

Boîte à gants transportable

Intervenez, prélevez, analysez tout en étant protégé



## Applications :

- Ouvertures de colis suspects
- Prélèvements d'échantillons sur site
- Travaux sous atmosphère inerte
- Révélation d'empreintes digitales
- Protection des personnes contre les projections lors de biopsies
- Réalisation des manipulations à l'abri de la poussière et de l'humidité

## Enceinte d'isolation transportable


Captair Pyramid est destinée à la protection des personnes, l'investigation et le transport d'éléments biologiques.

## Une installation et une utilisation simple

Enceinte multi-fonctions en PVC transparent de haute qualité. Assemblée en quelques secondes, elle peut être utilisée n'importe où. La forme inclinée de la structure permet une position de travail ergonomique. Transportable et légère, cette enceinte de protection peut convenir à beaucoup d'exigences en laboratoire ou sur le terrain.

## Étanchéité optimale

Chaque enceinte fait l'objet d'un test avant la mise sur le marché. Un gonflage à air comprimé est effectué à une pression de 2,5 mm Hg. Un certificat de conformité est fourni avec chaque enceinte qui est identifiée par un numéro de série.

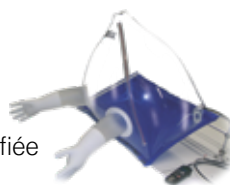


## Transport facile

Emballage souple en PVC, pour un transport facile.



# Spécifications

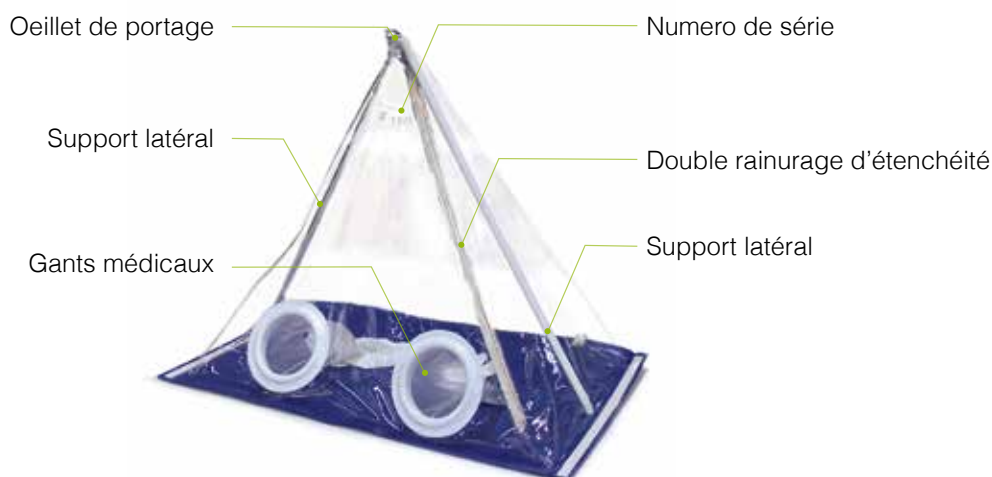

## Dimensions

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
860	560	725

## Caractéristiques

<b>Enceinte et base</b>	PVC souple assemblés par soudure haute fréquence
<b>Fermeture</b>	Double rainurage d'étanchéité (600mm)
<b>2 ouvertures bras</b>	PVC rigide 115 mm Ø
<b>Oeillet de portage</b>	16 mm Ø
<b>Température d'utilisation</b>	-25° à +45°
<b>Poids net</b>	1,55 kg

## Equipements

<b>Gants médicaux</b>	En butyl et manchettes en PVC
<b>Numéro de série</b>	Numéro unique pour plus de traçabilité
<b>Valve</b>	Permet le remplissage de l'enceinte avec un gaz inerte (Azote)

France  
+33 (0) 2 32 09 55 80 | ventes@erlab.net

Allemagne  
0800 330 47 31 | verkauf@erlab.net

USA  
+1 800-964-4434 | captairsales@erlab.com

Royaume-Uni  
+44 (0) 1722 341 940 | salesuk@erlab.net

Chine  
+86 (0) 512 5781 4085 | sales.china@erlab.com.cn

Italie  
+39 (0) 2 89 00 771 | vendite@erlab.net

Malaysia  
+60 (0) 7 3 555 724 | erlab@tm.net.my

Espagne  
+34 93 673 24 74 | ventas@erlab.net



www.erlab.com



2018 Celebrating 50 years  
of innovation in filtration