



Captair Pyramid

Glove Box trasportabile

Intervenire, prelevare, analizzare con la massima protezione



Applicazioni :

- Apertura di pacchi sospetti
- Prelievo di campioni sul campo
- Manipolazioni in atmosfera inerte
- Rivelazione d'impronte digitali
- Protezione contro le proiezioni (bipsie)
- Lavoro al riparo dalle polveri e dall'umidità

Cabina d'isolazione trasportabile

Captair Pyramid è destinata alla protezione delle persone, all'investigazione ed al trasporto di elementi biologici.

Facile installazione ed uso

Cabina multifunzione in PVC trasparente di alta qualità. Assemblata in soli pochi secondi, può essere utilizzata in qualsiasi luogo. La forma inclinata della struttura permette una posizione di lavoro ergonomica. Trasportabile e leggera, questa cabina di protezione può convenire a molte esigenze in laboratorio o sul campo.

Tenuta ottimale

Ogni cabina è sottoposta ad un test prima di essere immessa sul mercato: viene eseguito un gonfiaggio ad aria compressa sotto una pressione pari a 2,5 mm Hg.


Insieme ad ogni cabina, identificata da un numero di serie, è fornito un certificato di conformità.



Trasporto facile

Imballaggio in PVC flessibile, per essere facilmente trasportata.



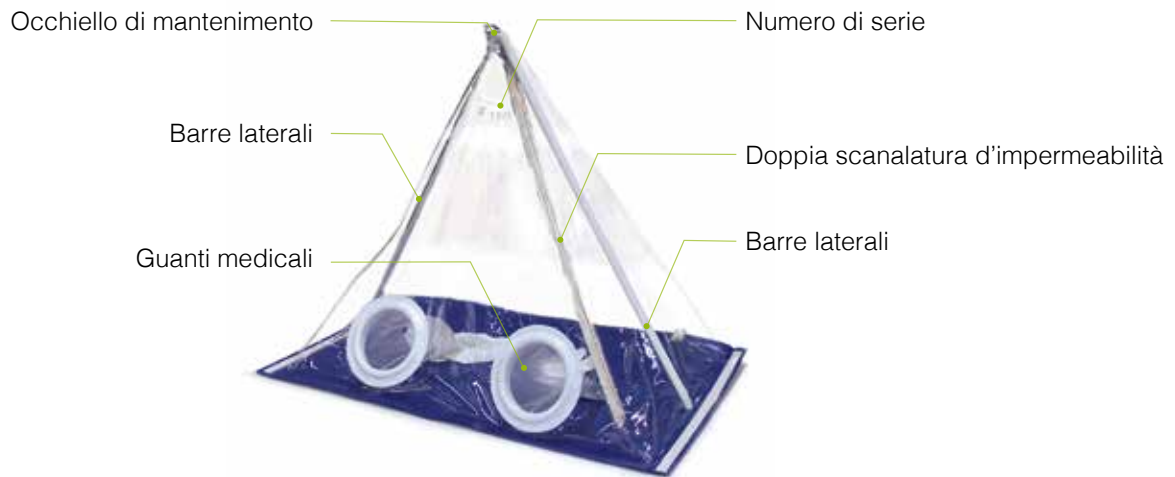

Dimensioni

Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)
860	560	725

Caratteristiche

Cabina e base	PVC flessibile assemblato con saldatura ad alta frequenza
Chiusura	Doppia scanalatura d'impermeabilità (600mm)
2 passaggi per le braccia	PVC rigido 115 mm Ø
Occhiello di mantenimento	16 mm Ø
Temperatura di utilizzo	-25° a +45°
Peso	1,55 kg

Equipaggiamenti

Guanti medicinali	In Butile e manichette in PVC
Numero di serie	Numero unico per una maggiore tracciabilità
Valvola	Permette il riempimento della cabina con un gas inerte (Azoto)

Francia
+33 (0) 2 32 09 55 80 | ventes@erlab.net

Germania
0800 330 47 31 | verkauf@erlab.net

Stati Uniti d'America
+1 800-964-4434 | captairsales@erlab.com

Regno Unito
+44 (0) 1722 341 940 | salesuk@erlab.net

Cina
+86 (0) 512 5781 4085 | sales.china@erlab.com.cn

Italia
+39 (0) 2 89 00 771 | vendite@erlab.net

Malesia
+60 (0) 7 3 555 724 | erlab@tm.net.my

Spagna
+34 93 673 24 74 | ventas@erlab.net

