





Ficha del producto

Captair 632A Midcap

Armarios de filtración sin conexión



Armario bajo con 1 zonas de almacenamiento / puertas correderas

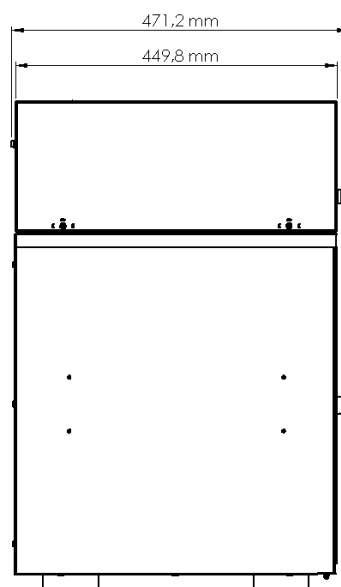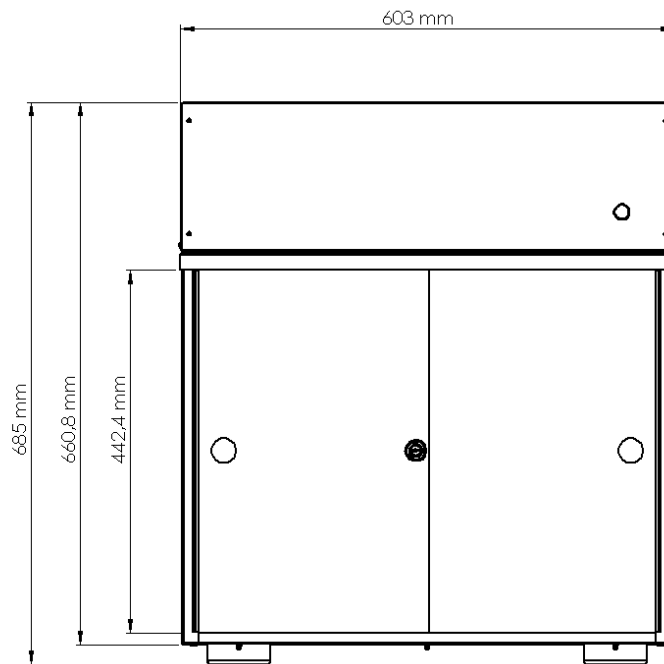

Especificaciones técnicas

Conformes con las normas	AFNOR NF X 15-211:2009 : Francia - BS 7989 : Reino Unido DIN 12 927 : Alemania - EN 1822 : 1998 (Filtre HEPA H14) - Marcaje CE
Caudal de aire	10 m³/h
Corriente/Frecuencia	110-230 V / 50-60 Hz
Consumo eléctrico	16 W
Estructura	Acero electro-galvanizado resistente a la corrosión recubierto de polímero termo-endurecedor anti-ácido
Paneles y fachadas	PMMA transparente e incoloro de gran calidad óptica. Inerte a numerosos productos químicos agresivos
Modulo de filtración	Polipropileno inyectado

Equipamientos

Filtración de carbón para gases y vapores	AS : Para vapores orgánicos - BE : Vapores ácidos F : Para vapores de formaldehído - K : Para vapores de amoníaco
Filtración de partículas para polvos *	HEPA H13 : 99,95 % según método MPPS, norma EN1822

* Optativo

Configuraciones de almacenamiento

	Puertas correderas
Volumen de almacenamiento	Alrededor 24 botellas de 1L (estantes altos) / Alrededor 20 botellas de 1L (estantes bajos) *
Zonas de almacenamient	2
Suministrado con	2 bandejas + 2 estantes
Bandeja de retención	2
Alfombrillas absorbentes	2
Cierre	Cerradura con llave

* Las cantidades pueden variar en función del tipo de recipiente utilizado



Sobre Erlab

El laboratorio de Investigación y Desarrollo de Erlab

Desde 1968, **Erlab** es el especialista, inventor y líder mundial de **cabinas de filtración autónomas de cero emisión no conectadas al laboratorio** para la manipulación de productos químicos con total seguridad.

1 La filtración Erlab

Proporcionamos tecnologías para proteger al personal de laboratorio de la inhalación de productos químicos. Esto es posible gracias a las tecnologías de filtración que se perfeccionan continuamente en **nuestro departamento de Investigación y Desarrollo desde hace más de 50 años**. Es por ello que, en 2009, creamos el sello **ERLAB ABOVE** para la tecnología de filtración de demostrada eficacia.

2 La norma AFNOR NF X15-211: 2009

La tecnología de filtración Erlab cumple con la **norma NF X15-211: 2009**, que es la más exigente de la industria en materia de filtración molecular, desarrollada por un comité de científicos independientes y fabricantes especializados.

Esta norma impone criterios de rendimiento relacionados con:

- La eficiencia de filtración
- La eficiencia de contención
- La velocidad de aire en fachada
- La documentación: guía de productos retenidos

3 El programa ESP

Con la compra de cada dispositivo, se incluye un conjunto de tres servicios diseñados para garantizar la seguridad.



eValiQuest

Análisis de riesgos - Determinación de las necesidades de protección - Determinación de las necesidades ergonómicas.



ValiPass

Instalación certificada - Manipulación con total seguridad.



ValiGuard

Seguimiento permanente - Control preventivo y mantenimiento - Reconfiguración del dispositivo según las necesidades de protección - Evolución de las manipulaciones.

4 La tecnología Flex

La combinación de tecnologías de filtración molecular y de partículas permite configurar un único dispositivo para cubrir las necesidades de protección de los laboratorios. Esta innovación del laboratorio de I+D de Erlab ofrece una **flexibilidad, adaptabilidad y economía** sin precedentes. Un solo dispositivo puede ser reconfigurado con el tiempo y fácilmente reasignado a otras aplicaciones.

5 La tecnología Smart

La tecnología Smart es una forma **sencilla e innovadora** de comunicarse con mayor seguridad. Esta tecnología indica el nivel de protección del usuario mediante una señal luminosa y sonora. Las ventajas de la tecnología:

1/ Impulsos luminosos: La comunicación en tiempo real por impulsos luminosos LED advierte intuitivamente al usuario sobre el estado de funcionamiento del dispositivo.

2/ La sencillez: Una sola tecla de activación.

3/ Sistema de detección: El exclusivo sistema de detección controla continuamente el estado de rendimiento de la filtración.

4/ Servicio incorporado: Este servicio permite acceder directamente a las informaciones siguientes: **el estado, los ajustes y el historial** del dispositivo.

France
+33 (0) 2 32 09 55 80 | ventes@erlab.net

United States
+1 800-964-4434 | captairsales@erlab.com

China
+86 (0) 512 5781 4085 | sales.china@erlab.com.cn

Spain
+34 936 732 474 | export.south@erlab.net

Germany
0800 330 47 31 | export.north@erlab.net

United Kingdom
+44 (0) 1722 341 940 | export.north@erlab.net

Italy
+39 (0) 2 89 00 771 | export.south@erlab.net



erlab
You can breathe.

www.erlab.com

ecosystem